

Optibath

Tirette d'alerte sanitaire sans fil

Référence D 117 950

Mode d'emploi

10-06-2019 - V1.0

Général:

La tirette d'alerte sanitaire sans fil envoie une alarme lorsque quelqu'un tire le cordon. L'interrupteur peut être facilement monté sur le mur en utilisant la baïonnette murale fournie. La tirette sanitaire sans fil peut être utilisée en combinaison avec tous les récepteurs et pagers DAZA.

Montage

Fixez la baïonnette murale fournie à +/- 1,8 mètres au-dessus du sol. Vérifiez si le cordon arrive à la bonne hauteur quand vous montez définitivement la tirette sanitaire.

Il est préférable de la fixer solidement afin de pouvoir tirer fermement sur le cordon en cas d'urgence sans que la tirette sanitaire ne se détache.

Clipper ensuite la tirette sanitaire à la baïonnette murale.

Alerte:

Pour déclencher l'alarme, tirez le cordon rouge vers le bas. Une diode rouge à l'avant s'allume brièvement. L'alarme sans fil sera envoyée au récepteur Daza ou au Pager.

Relâcher le cordon, vous pouvez envoyer la prochaine alarme au bout de 4 secondes.

Remplacement de la batterie:

La tirette sanitaire est équipée d'une pile au lithium CR 123A, 3V.

Référence: AP60033

Ouvrir la tirette sanitaire en retirant les 4 vis à l'arrière. À l'intérieur, vous verrez le logement-pile. Retirer délicatement la batterie et, si nécessaire, installer la nouvelle batterie.

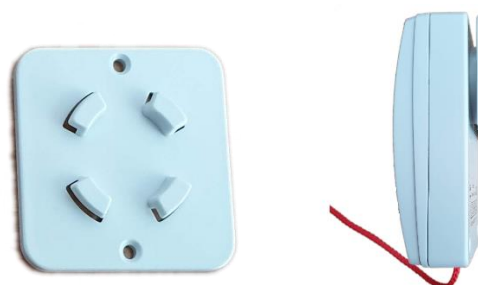


Figure 1 : la baïonnette murale et la tirette sanitaire



Figure 1: alerte



Figure 3: Emplacement de la batterie

Abilanx Park Avenue Rue Léon Griffon 56890 Saint Avé
Tél : 02 97 63 70 46 Fax : 02 97 63 74 90 Courriel : contact@abilanx.com Web : www.abilanx.com